

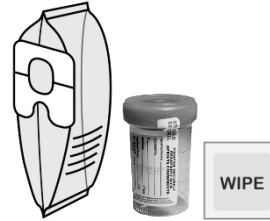
如何采集婴儿尿液样本

How to collect a urine sample from Babies

注意： 采集样本之前，请看清楚全部说明。
按照每个步骤去做，确保正确采集样本。

我们会为您提供

- 尿袋
- 样本容器
(在准备好要使用之前，请不要打开。)
- 湿巾



您需要自备

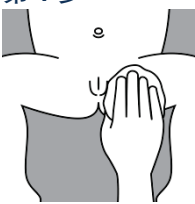
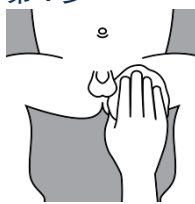
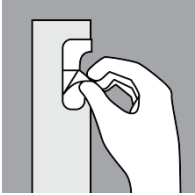
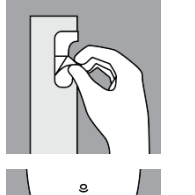
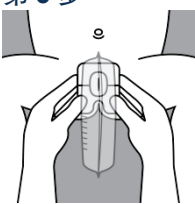
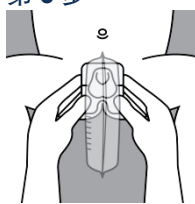
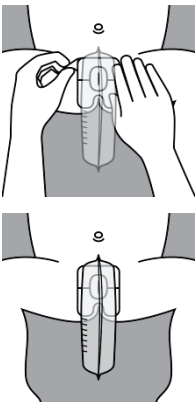
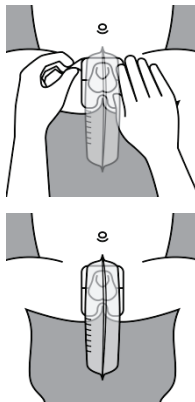
- 一片干净的尿布

采集样本的步骤

1. 在样本容器上写上您孩子的全名和出生日期（若没有标签）。
2. 用肥皂和水洗手。
3. 彻底擦干双手。
4. 取下孩子的尿布
5. 用湿巾清洁孩子的阴部和臀部，并粘贴尿袋（**详细说明见下页**）。
6. 让这些部位自然风干。
7. 把干净的尿布穿在尿袋外面。
8. 每隔 20 分钟查看一下有没有尿液。
9. 一旦有大约 10 到 15 毫升（2 至 3 茶匙）的尿液，就可以采集样本了。
10. 用肥皂和水洗手。
11. 打开样本容器，并小心地将盖子拿下来。
任何时候都切勿触摸容器或盖子的内部。
12. 小心取下尿袋。
13. 将尿袋置于打开的样品容器上方。
14. 用剪刀剪开尿袋下方的一角，或揭掉尿袋底部覆盖开口的标签。
15. 让尿液漏入样本容器中。
16. 把盖子拧紧。
17. 洗手。
18. 尽快将样本送到化验室。
要获得最佳效果，请在采集后 30 分钟内递送样品。
告诉实验室工作人员，样本是从尿袋中采集的。

无法在 30 分钟内送到化验室？

- 将尿样的采集时间写在样本容器上。
- 将样本存入冰箱。
- 尽快送来。

适用于女婴	适用于男婴
<p>第 1 步</p>  <p>从前向后擦拭，清洁阴唇皮肤褶皱的间隙。 清洁肛门周围。让这些部位自然风干。</p>	<p>第 1 步</p>  <p>首先从龟头往下清洁阴茎（如果需要可把包皮往后拉）。 清洁阴囊，清洁肛门周围。让这些部位自然风干。</p>
<p>第 2 步</p>  <p>揭掉尿袋不干胶贴下半部的保护衬。</p>	<p>第 2 步</p>  <p>揭掉尿袋不干胶贴下半部的保护衬。</p> <p>如果孩子很活跃，在将开口套到阴囊和阴茎上之前，先不要揭掉不干胶保护衬，这样比较方便。</p>
<p>第 3 步</p>  <p>分开孩子的双腿，展开股沟处的皮肤皱褶。 将尿袋的下半部分与孩子贴合。先从肛门和阴道之间窄小部位的中心开始粘贴。向外整理，用力按压不干胶贴，使贴合平整。</p>	<p>第 3 步</p>  <p>分开孩子的双腿，展开股沟处的皮肤皱褶。 将尿袋的下半部分与孩子贴合。先从肛门和阴囊之间窄小部位的中心开始粘贴。向外整理，用力按压阴囊周围的不干胶贴，使贴合平整。 将阴茎插入尿袋的开口。</p>
<p>第 4 步</p>  <p>揭掉不干胶贴的上半部分。 向上、向外整理，用力按压不干胶贴，使贴合平整。</p>	<p>第 4 步</p>  <p>揭掉不干胶贴的上半部分。 向上、向外整理，用力按压不干胶贴，使贴合平整。</p>

图片：© 菲莎卫生局 (Fraser Health)